

SMILY

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia zębów SMILY



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Drogi Kliencie,
dziękujemy za zakup naszego produktu.

Pomaga on utrzymać właściwą higienę zębów oraz dziąseł. Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia zębów skutecznie usuwa płytkę nazębną, kamień nazębny, przebarwienia i twarde osady z zębów, zapobiegając chorobom dziąseł. To wielofunkcyjne urządzenie wykorzystuje zaawansowane wibracje do usuwania kamienia nazębnego i masowania dziąseł, dbając o piękny uśmiech i świeży oddech każdego dnia!

Niniejsza instrukcja zawiera wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i obsługi. Przed użyciem produktu należy dokładnie się z nią zapoznać.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:

1x ultradźwiękowy skaler
1x kabel do ładowania
1x instrukcja obsługi



SPECYFIKACJA

Napięcie znamionowe: 3,7 V
Pojemność baterii: 300 mAh
Czas ładowania: około 2 godziny
Adapter: 5 V / 5 mA
Natężenie prądu w trybie czuwania:
20 uA
Prąd znamionowy: 200 mA
Głośność silnika: <60 decybeli
Czas pracy: około 2 godziny

Liczba programów: 5
Klasa wodoodporności: IPX6
Model: ładowany (wbudowany akumulator)
Docelowi użytkownicy: osoby dorosłe
Materiał: silikon medyczny + tworzywo sztuczne
Warunki użytkowania: temperatura pokojowa

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem produktu należy przeczytać uważnie niniejszą instrukcję i ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

- Skaler jest przeznaczony do celów stomatologicznych. Przeznaczony jest do usuwania osadu i kamienia nazębnego oraz przeprowadzania innych zabiegów związanych z utrzymaniem higieny zębów, w których wykorzystywane są wibracje ultradźwiękowe. Nie należy stosować go do celów, do których nie jest przeznaczony. Jeśli nie wiedzą Państwo, czy zastosowanie jest zgodne z przeznaczeniem, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem lub obsługą sklepu, w którym produkt został kupiony.
- Należy używać tylko zgodnie z przeznaczeniem. Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem produktu, którego naprawa może być niemożliwa. Przed użyciem produktu należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.
- Podczas czyszczenia zawsze należy przykładać końcówkę do powierzchni zębów. Należy unikać nadmiernego kontaktu końcówki z tkankami miękkimi,


takimi jak dziąsła, błony śluzowe i skóra.

- Przed użyciem należy sprawdzić, czy końcówka działa prawidłowo. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy natychmiast zaprzestać użytkowania i skontaktować się z dystrybutorem.
- Podczas czyszczenia końcówka nie może dotykać ceramicznej protezy. Może to spowodować uszkodzenie końcówki.
- Do ładowania urządzenia należy używać wyłącznie oryginalnego zasilacza.
- Przed podłączeniem zasilacza do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na jego etykiecie odpowiada napięciu w gniazdku.
- Metalowa główka urządzenia nie jest wymienna.
- Nie należy wystawiać urządzenia (ani powiązanych akcesoriów) na działanie czynników zewnętrznych, ekstremalnych temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, nadmiernej wilgotności lub nadmiernego zapylenia.
- Temperatura pomieszczenia powinna wynosić od -10°C do 40°C .
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie przez długi czas.
- Ten produkt jest przeznaczony tylko dla dorosłych. Po użyciu należy właściwie przechowywać produkt. Trzymać z dala od dzieci.
- Ten produkt zawiera akumulator. Nie należy wkładać go do ognia ani pojemnika o wysokiej temperaturze, aby uniknąć pożaru lub wybuchu.
- Nie należy umieszczać urządzenia (ani powiązanych akcesoriów) w pobliżu grzejników, otwartego ognia lub innych urządzeń będących źródłem ciepła.
- Trzymać urządzenie do czyszczenia zębów w odpowiedniej odległości od oczu.
- Nie należy odłączać zasilacza od gniazdka elektrycznego, pociągając za przewód zasilający. Może to spowodować uszkodzenie zasilacza lub gniazdka elektrycznego. Należy odłączyć zasilacz od gniazdka elektrycznego, pociągając za wtyczkę.
- Przed rozpoczęciem użytkowania zawsze należy sprawdzić, czy elementy urządzenia nie są uszkodzone. Nie wolno używać uszkodzonych elementów i należy je wymienić.
- Nie należy umieszczać przewodu zasilacza na ostrych przedmiotach.
- Aby nie dopuścić do wystąpienia niebezpiecznej sytuacji, nie należy samodzielnie naprawiać ani modyfikować urządzenia ani żadnych powiązanych z nim akcesoriów. W przypadku konieczności wykonania jakichkolwiek napraw należy skontaktować się z autoryzowanym centrum serwisowym. Ingerencja w konstrukcję produktu grozi utratą praw użytkownika wynikających z niezadowolającej wydajności lub gwarancji jakości.
- Nie należy używać urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone bądź jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, zostało upuszczone lub w jakikolwiek sposób uszkodzone.

- Nie należy owijać przewodu wokół urządzenia.
- Wszelkie czynności serwisowe lub naprawy muszą być wykonywane przez przedstawiciela autoryzowanego serwisu.
- Produktu nie można używać w pobliżu gazów palnych.
- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.

Uwaga: nie wolno używać produktu w trakcie jego ładowania.

CZĘŚCI

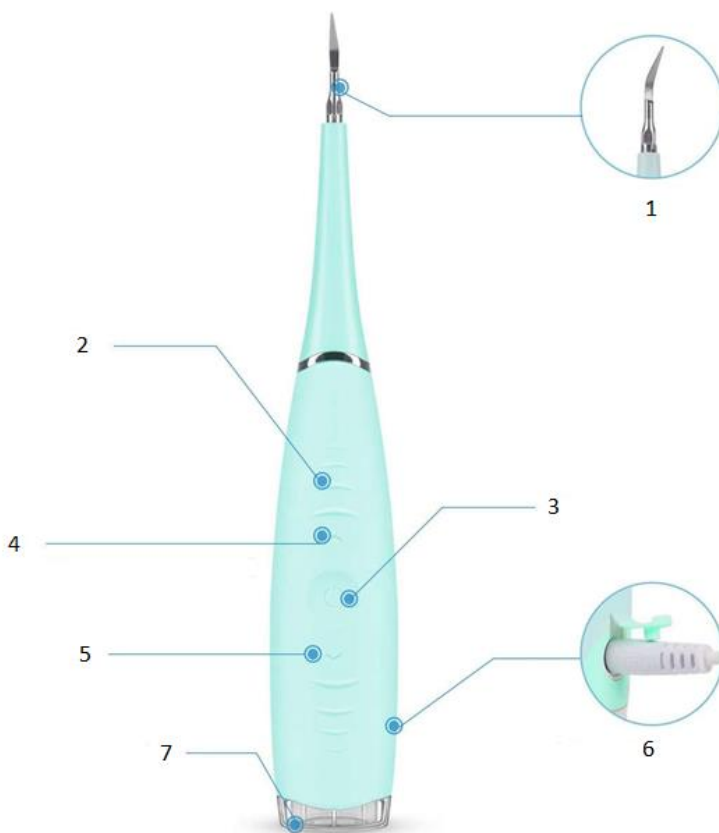

| | |
|---|----------------------------|
| 1. Głowica czyszcząca | 5. Przełącznik programów – |
| 2. Pasek antypoślizgowy | 6. Port ładowania |
| 3. Przełącznik włącz / wyłącz | 7. Wskaźnik ładowania |
| 4. Przełącznik programów + (5 programów, zmiana poprzez przesuwanie góra / dół) | |

ŁADOWANIE

Ładowane przez USB:

Bezpieczne i szybkie ładowanie przez USB.

1. Aby rozpocząć ładowanie, należy podłączyć ładowarkę do wejścia w dolnej części urządzenia, a następnie podłączyć ją do zasilania.
2. Kiedy zacznie się ładowanie, wskaźnik ładowania zaświeci się na czerwono. Po całkowitym naładowaniu urządzenia wskaźnik zaświeci się na zielono.



UWAGA:

- Pełne ładowanie trwa około 2 godzin.
- Po rozpoczęciu ładowania urządzenie przełączy się w tryb wyłączony (urządzenia nie będzie można użyć podczas ładowania).
- Po naładowaniu produktu można użyć około 200 razy.

Przy pierwszym ładowaniu urządzenia lub w przypadku nieużywania go przez dłuższy czas (dłużej niż 3 miesiące) całkowite naładowanie może zająć więcej czasu.

- Należy odłączyć naładowane urządzenie od zasilacza sieciowego i wyjąć wtyczkę zasilacza z gniazdka elektrycznego. Po odłączeniu urządzenia od zasilacza wskaźnik ładowania LED zgaśnie.

Zalecenia dotyczące żywotności baterii:

- Urządzenie należy ładować w temperaturze pokojowej.
- Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania dłużej, niż jest to konieczne do jego naładowania.
- Najlepiej przechowywać urządzenie w pełni naładowane.
- W przypadku dłuższego okresu nieużywania urządzenia należy ładować je co najmniej raz na 6 miesięcy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI




Urządzenie przekształca energię elektryczną w energię drgań ultradźwiękowych.

Należy nacisnąć przycisk, aby włączyć urządzenie, ustawić moc za pomocą górnych i dolnych przycisków regulacji i rozpocząć czyszczenie wybranych obszarów.




Końcówkę należy przyłożyć do zęba tak, aby ruch końcówki był równoległy do powierzchni zęba. Ostatnie 2 mm końcówki działają najmocniej!

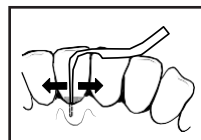

Do normalnego czyszczenia rzadko potrzebne jest więcej niż 50% poziomu mocy. Jednak trudny do usunięcia kamień nazębny może wymagać większej mocy.

Należy utrzymywać kontakt między końcówką a powierzchnią zęba podczas czyszczenia. Powoli przesuwaj końcówkę do przodu i do tyłu, urządzenie wyczyści wybraną powierzchnię. Używać krótkich i długich pociągnięć tak, aby oczyścić całą powierzchnię wszystkich zębów.

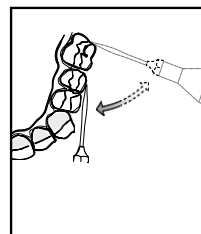

Końcówka powinna być skierowana w stronę kieszeni zęba.

Należy prowadzić końcówkę zgodnie z naturalnym kształtem zęba tak, aby była ustawiona równoległe do jego powierzchni.



Przy prawidłowym ustawieniu mocy, odpowiednim nacisku na ząb (około 20 gramów, ale nie więcej niż 50) i końcówce ustawionej równolegle do powierzchni, zabieg będzie delikatny, cichy i skuteczny.



UWAGA!

- Jeżeli podczas zabiegu będzie słychać pisk (głośny i zdecydowany), może to oznaczać, że nacisk na ząb jest zbyt mały lub końcówka nie jest ustawiona równolegle do powierzchni zęba.
- Nie dociskać zbyt mocno ręką. Lekko przytrzymywać przy powierzchni zęba.
- Zwrócić szczególną uwagę na wrażliwą linię dziąseł.
- Niektórzy użytkownicy mogą napotkać na pewne trudności przy pierwszym użyciu, ale stopniowo to urządzenie stanie się ich ulubionym narzędziem do pielęgnacji jamy ustnej!
- Płytkę nazębna oraz kamień mają postać proszku. Dlatego po użyciu urządzenia należy przepłukać usta.
- Należy używać na zwilżonych zębach.
- Jeśli podczas użytkowania powierzchnia zębów zacznie wysychać, należy przepłukać usta.
- Przy stosowaniu po wewnętrznej stronie zębów należy używać lusterka dentystycznego.

Po zakończeniu czyszczenia zębów:

- Należy dobrze wypłukać usta
- Umyć metalową głowicę pod czystą bieżącą wodą
- Przetrzeć urządzenie do czyszczenia zębów z zewnątrz

Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to informuje o tym, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z odpadami komunalnymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przetwarzać je w sposób odpowiedzialny, wspierając w ten sposób zrównoważone metody ponownego wykorzystania surowców. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt i poddać go recyklingowi w sposób bezpieczny dla środowiska.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymogów określonych w obowiązujących dyrektywach WE.

