

SMILY

Ferramenta elétrica e portátil de limpeza dentária



MANUAL DO UTILIZADOR

Caro cliente,

Obrigado por adquirir o nosso produto.

A partir de agora poderá ter sempre dentes e gengivas saudáveis. Remove eficazmente a placa dentária, cálculos dentários, manchas e tártaro duro, prevenindo doenças gengivais. Esta ferramenta de limpeza dentária multifunções utiliza vibrações avançadas para eliminar o tártaro dos seus dentes e massajar as suas gengivas, oferecendo-lhe um sorriso confiante e um hálito fresco todas as manhãs!

Este manual inclui todas as diretrizes de segurança e instruções de funcionamento deste aparelho. Leia atentamente o manual antes de utilizar o produto.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x ferramenta elétrica de limpeza dentária
- 1 x cabo de carregamento
- 1 x manual do utilizador



ESPECIFICAÇÕES

Tensão nominal: 3,7 V	Tempo de trabalho: 5
Capacidade da bateria: 300 mAh	Norma de impermeabilidade: IPX6
Tempo de carregamento: cerca de duas horas	Estilo: carregamento (bateria incorporada)
Adaptador: 5 V/5 mA	Público alvo: adultos
Corrente em espera: 20 uA	Material: silicone de qualidade médica + plástico
Corrente nominal: 200 mA	Ambiente de utilização: temperatura normal
Ruído do motor: menos de 60 decibéis	
Tempo de funcionamento: cerca de duas horas	

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

Leia atentamente este manual antes de utilizar o produto e **GUARDE-O PARA REFERÊNCIA FUTURA.**


- Esta ferramenta de limpeza dentária destina-se a finalidades dentárias. Foi concebida para eliminar tártaro ou cálculos nos dentes e para outros trabalhos dentários onde a vibração ultrassónica é essencial. Não utilize para finalidades que não as previstas. Se tiver dúvidas sobre a utilização, contacte o seu revendedor local ou local de compra.
- Utilize esta ferramenta apenas para as finalidades previstas. O não cumprimento das instruções de funcionamento pode resultar em lesões graves ao utilizador ou danos no produto, possivelmente irreparáveis. Antes de utilizar o produto, certifique-se de que leu e compreendeu as instruções de funcionamento.
- Durante a limpeza, coloque a extremidade em contacto com a superfície dos dentes. Evite o contacto desnecessário da extremidade com tecidos moles, como a gengiva, mucosas ou pele.

- Verifique a existência de vibrações anormais da extremidade antes da utilização. Se encontrar anormalidades, interrompa imediatamente a utilização da ferramenta de limpeza dentária e contacte o revendedor.
- Não permita que a extremidade entre em contacto com próteses de cerâmica durante a limpeza. Fazê-lo, poderá danificar a extremidade.
- Utilize a ferramenta de limpeza dentária apenas com o transformador original.
- Antes de ligar o transformador a uma tomada elétrica, certifique-se de que a voltagem indicada na etiqueta de classificação corresponde à voltagem da tomada elétrica.
- A cabeça metálica da ferramenta de limpeza não é substituível.
- Não exponha a ferramenta de limpeza dentária ao ambiente exterior, temperaturas extremas, luz solar direta, humidade excessiva ou ambientes com muito pó.
- Utilize-o a uma temperatura ambiente interior entre os -10 °C e os 40 °C.
- Não lave nem molhe o produto durante longos períodos.
- Este produto deve ser utilizado apenas por adultos. Guarde devidamente o produto após cada utilização. Mantenha-o fora do alcance das crianças para evitar lesões e acidentes.
- Este produto contém uma bateria. Não o coloque num fogo ou num recipiente a altas temperaturas para evitar incêndios ou explosões.
- Não coloque o produto perto de aquecedores, fogueiras ou outros equipamentos que sejam fontes de calor.
- Mantenha a ferramenta de limpeza dentária a uma distância suficiente dos olhos.
- Não desligue o transformador da tomada puxando pelo cabo de alimentação. Isso pode danificar o transformador ou a tomada. Desligue o transformador da tomada puxando a ficha.
- Verifique sempre a existência de danos nos componentes da unidade antes de iniciar o tratamento. Os componentes danificados não devem ser utilizados e devem ser substituídos.
- Não coloque o cabo do transformador sobre objetos pontiagudos.
- Para evitar situações de risco, não repare a ferramenta de limpeza dentária ou qualquer um dos seus acessórios, nem a modifique de qualquer forma. Para qualquer reparação, entre em contacto com um centro de serviço autorizado. Ao adulterar o produto, corre o risco de anular os seus direitos legais decorrentes de desempenho insatisfatório ou garantia de qualidade.
- Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados, se o aparelho apresentar avarias ou tiver sido deixado cair ou tiver sido danificado de alguma forma.
- Não enrole o cabo à volta do aparelho.

- Qualquer serviço ou reparação devem ser realizados por um centro de serviço autorizado.
- O produto não deve ser utilizado na presença de gases inflamáveis.
- Utilize este aparelho apenas para o fim a que se destina.

Atenção: não utilize o produto durante o carregamento.

COMPONENTES

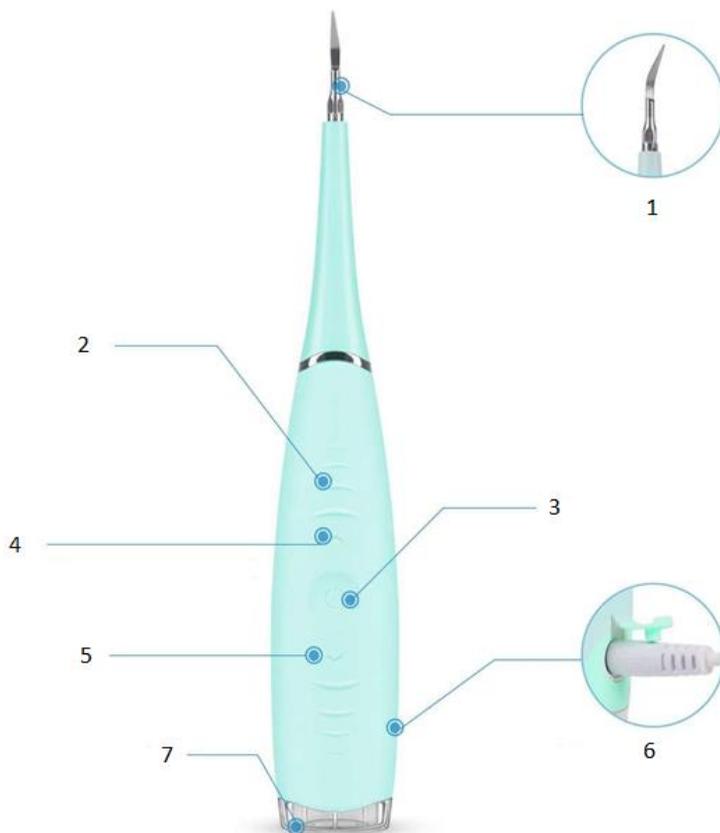

1. Cabeça de limpeza	5. Parte inferior do corpo da ferramenta
2. Banda antiderrapante	6. Porta de carregamento
3. Interruptor para ligar/desligar	7. Indicador de carregamento
4. Parte superior do corpo da ferramenta (total de cinco acessórios)	

CARREGAMENTO

Recarregável por USB:

Carregamento seguro e rápido por USB.

1. Insira o carregador na parte inferior da ferramenta de limpeza dentária, ligue-o à corrente para iniciar o carregamento.
2. A luz indicadora acender-se-á a vermelho, indicando que o carregamento foi iniciado. Quando o dispositivo estiver totalmente carregado, a luz passará a verde.



NOTA:

- O carregamento completo demora aproximadamente duas horas.
- Depois de entrar no modo de carregamento, a ferramenta de limpeza dentária irá desligar-se (a ferramenta não irá funcionar durante o carregamento).
- Depois do produto estar carregado, pode ser utilizado cerca de 200 vezes.

Se estiver a carregar a ferramenta de limpeza dentária pela primeira vez ou se não a utilizar durante um longo período (mais de três meses), o carregamento completo pode demorar mais tempo.

- Desligue a ferramenta de limpeza dentária do transformador e desligue o transformador da tomada elétrica. Depois de desligar o produto do transformador, o indicador LED de carregamento desliga-se.

Recomendações para uma longa vida útil da bateria:

- Carregue o produto à temperatura ambiente.
- Não deixe o produto ligado à fonte de alimentação elétrica durante mais tempo do que o necessário para o carregar.
- Idealmente, guarde o produto totalmente carregado.
- Se não utilizar o produto durante um longo período, carregue-o, pelo menos, de seis em seis meses.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO




Esta ferramenta de limpeza baseia-se no princípio da conversão de energia elétrica em energia de vibração ultrassónica.

Prima o botão de alimentação para ligar o dispositivo, ajuste a potência com os botões de ajuste superior e inferior e inicie a limpeza dos seus dentes.




A lateral e a extremidade devem entrar em contacto com o dente de forma a que o movimento da extremidade seja paralelo à superfície do dente. Os primeiros dois milímetros da extremidade são os mais eficientes!

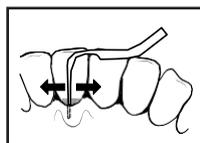

A limpeza normal dos dentes raramente requer mais de 50% do nível de potência. No entanto, os cálculos difíceis de remover podem precisar de um nível de potência superior.

Certifique-se de que a extremidade está em contacto com a superfície do dente durante a limpeza. Continue a mover a extremidade lentamente para trás e para a frente durante a limpeza. Faça movimentos pequenos e longos de forma a que toda a superfície do dente seja limpa.

A extremidade fica, normalmente, apontada para o interior do dente.

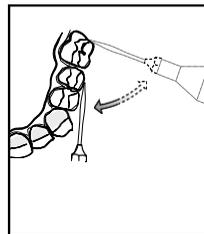

Para manter a extremidade paralela à superfície de cada dente, é importante seguir a anatomia do dente.



Com a potência certa, exerça uma pressão adequada no dente (aproximadamente 20 gramas, mas sem nunca exceder as 50 gramas) e mantenha a extremidade paralela ao dente. Deste modo o tratamento será bem realizado e de forma silenciosa.



ATENÇÃO!

- Se, durante o tratamento, ouvir um rangido (forte e dominante), a pressão exercida contra o dente poderá ser demasiado fraca ou a extremidade poderá não estar paralela à superfície do dente.
- Não exerça muita força com a mão. Pressione ligeiramente a ferramenta contra os dentes.
- Tenha cuidado com a linha da gengiva, que pode ser sensível.
- Para alguns utilizadores, a primeira utilização pode ser difícil, mas, gradualmente, esta passará a ser a sua ferramenta de cuidado dentário de eleição!
- A placa e as manchas serão libertadas formando um pó. Por isso, passe a boca por água após a utilização.
- Utilize a ferramenta com a boca húmida.
- Se a boca ficar seca durante a utilização, passe-a por água.
- Ao utilizar a ferramenta no interior do dente, utilize um espelho dentário.

Depois de terminar de limpar os dentes:

- Passe bem a boca por água.
- Lave a cabeça metálica com água corrente e limpa.
- Limpe o corpo da ferramenta de limpeza.

Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.

