

{SIX PACK} SET

1. Cum funcționează dispozitivul?

Setul {Six Pack} utilizează curentul electric de joasă tensiune pentru a contracta mușchii și pentru a oferi un efect de masaj blând sau de întărire musculară:

- Relaxează mușchii încordați ai umerilor, spatelui și taliei
- Îmbunătățește tonusul muscular
- Masaj

2. Specificații:

Tensiune:	Baterie alcalină 1,5 V AAA x 2EA
Moduri de operare:	A-F (6 moduri)
Frecvență:	1~100 Hz
Durată program:	12 minute
Putere de ieșire:	Max. 9,8 mA
Dimensiune:	21 x 10 x 2,3 cm
Greutate:	57,4 g

3. Caracteristicile produsului:

3.1. Terapie cu frecvență joasă

Cu ajutorul electricității, dispozitivul creează un impuls de frecvență joasă, care are un efect pozitiv asupra corpului. Setați intensitatea după preferințele dvs. O frecvență joasă are efectul unui masaj delicat al corpului.

3.2. Selectați din 6 programe

3.2.1. Selectați pur și simplu din 6 moduri de operare

3.2.2. Programul se oprește automat după 12 minute

4. Mod de utilizare




ON/INC: pornire/creștere intensitate

OFF/DEC: oprire/micșorare intensitate

PROGRAM: comutare între programe

Indicatori mod de operare:

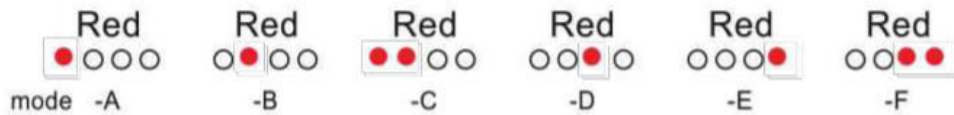

Când apăsați butonul „pornire/creștere intensitate”, lumina indicatoare devine mai puternică și invers, atunci când apăsați butonul „oprire/micșorare intensitate”, lumina indicatoare devine mai slabă.

- Ambele butoane au 10 nivele
- Comutarea între programe: selectați din 6 moduri (A~F)
- Când bateria este consumată, scoateți capacul compartimentului pentru baterii și înlocuiți bateria, apoi puneți capacul la loc.

5. Modul de utilizare a setului {Six pack}

- Utilizați întotdeauna pe pielea curată și uscată
- Îndepărtați folia protectoare de pe plăcuțele cu gel
- Aplicați dispozitivul pe partea corpului dorită (abdomen, picioare, umeri etc.)

! NU PORNIȚI DISPOZITIVUL ÎNAINTE DE A-L APLICA PE CORP.

! NU ATINGEȚI SUPRAFEȚELE ADEZIVE PENTRU A EVITA REDUCEREA DURATEI DE VIAȚĂ AL PLĂCUȚELOR CU GEL.

6. Prima utilizare

- Scoateți dispozitivul din cutie
- Aplicați dispozitivul pe partea corpului dorită
- Selectați programul dorit
- Reglați intensitatea
- Durata programului este de 12 minute
- Apăsați în mod repetat butonul de oprire până când lumina indicatoare se stinge

Cel mai bine este să utilizați dispozitivul maxim 12 minute o dată, de 2-3 ori pe zi. Dacă îl utilizați mai mult timp, e posibil să simțiți oboseală.

Evitați utilizarea dispozitivului la 30 de minute după masă; cel mai bine este să utilizați dispozitivul după duș, pe pielea curată și uscată

7. Îngrijire

- Opriți aparatul după utilizare.
- Puneți un film de protecție pe plăcuțele cu gel pentru a le menține adezive și curate.
- Curățați murdăria cu o cârpă umedă și cu un agent de curățare blând.

- Nu expuneți la lumina directă a soarelui, căldură, umiditate, foc, electricitate etc.
- A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
- Nu atingeți dispozitivul cu mâinile ude.
- Dacă nu utilizați dispozitivul pentru un timp mai îndelungat, scoateți bateria din controler.

8. Înlocuirea bateriei

- Deschideți capacul compartimentului pentru baterii
- Introduceți corect bateria (atenție la semnele + și -)
- Puneți capacul la loc
- Porniți dispozitivul și verificați dacă funcționează

REZUMAT:



1. Deschideți compartimentul pentru baterii



2. Introduceți bateriile (2 x AAA)



3. Atașați controlerul la unitate



4. Dezlipiți filmul de protecție



5. Atașați controlerul la unitate



6. Plasați banda pe braț/picior