

VFACE

Instrument de frumusețe energetic



MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.

În doar 5 minute pe noapte puteți duce îngrijirea pielii la un nivel cu totul nou. Cu ajutorul aparatului nostru facial de masaj, veți atinge în sfârșit întregul potențial al rutinei de îngrijire a pielii și veți obține o piele radiantă și strălucitoare rapid!

PACHETUL INCLUDE:

1 x instrument de
frumusețe energetic

1 x manual
1 x sac

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

Material: metal

Culoare: auriu

Tensiune nominală: DC 1,5V

Frecvență: 6000 de rotații pe minut

Putere: Bateria 1 x AA (nu este inclusă)

Design rezistent la apă


Utilizați pe frunte, obraji, gât, claviculă,
umeri, brațe, mâini și picioare.





1. Cap în formă de T
2. Compartimentul pentru baterii
3. Comutator PORNIRE/OPRIRE

METODA DE INSTALARE / ÎNLOCUIRE A BATERIEI

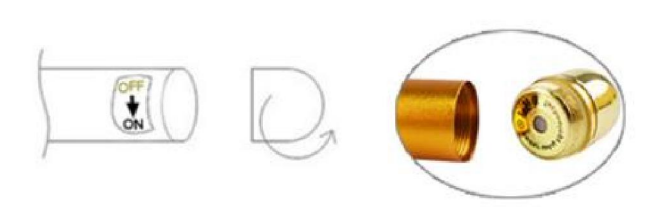


1. Rotiți în sens invers acelor de ceasornic pentru a scoate capacul comutatorului.



2. Introduceți bateria (1 x AA), închideți capacul comutatorului și rotiți-l în sensul acelor de ceasornic pentru a-l strânge la loc.

OPERAREA COMUTATORULUI

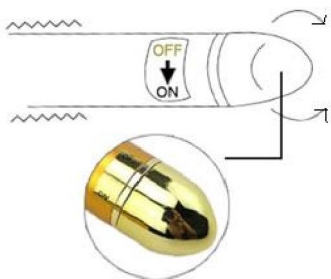

PORNIȚI: rotiți capacul comutatorului în sens invers acelor de ceasornic pentru a porni dispozitivul.

OPRIȚI: rotiți capacul comutatorului în sensul acelor de ceasornic pentru a porni dispozitivul.

INDICAȚII:



1. Curățați-vă fața și gâtul.
2. Aplicați un ser de lifting sau o cremă hidratantă.
3. Porniți aparatul.
4. Glisați ferm vârful T al aparatului a VFACE folosind o mișcare ascendentă, ghidând-o din zonele interioare către cele exterioare ale feței.
5. Țineți instrumentul pe fiecare secțiune timp de 5 secunde.

Frecvența tratamentului: În fiecare zi (după curățarea de dimineață și cea de seară).

Timp de tratament: 5-10 minute

Curățați și puneți aparatul de frumusețe energetic VFACE înapoi în carcasa originală.

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

- După fiecare utilizare, asigurați-vă că folosiți o cârpă moale și uscată pentru a șterge toată umezeala și a șterge bara de înfrumusețare. Întoarceți aparatul în husa inițială.
- Scoateți bateria dacă aparatul de frumusețe energetic nu este folosit pentru mult timp.
- Păstrați produsul depozitat la temperatura camerei și în mediu uscat.

Instrucțiuni referitoare la reciclare și aruncare



Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna produsul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE aplicabile.