

VÁKUOVÝ ČISTIČ PÓROV KILPOR 2.0



Model Nb.: XN-8030

MANUÁL

Úvod

Ďakujeme, že ste si vybrali práve náš produkt. Prosím prečítajte si pozorne tento návod, pred prvým použitím aby ste správne pochopili ako produkt používať. Vždy používajte produkt podľa manuálu, zamedzte tým nepríjemnostiam, či prípadným zraneniam. Odložte si manuál pre prípad použitia v budúcnosti.

O produkte

Tento čistič pórov pre aknóznou pleť funguje na princípe podtlaku a disponuje funkciami dermabrázie, čistenia pórov, odmastenia a odsatia iných nečistôt z pleti. Tento prenosný čistič s funkciou dermabrázie má 4 vymeniteľné nadstavce s rôznymi funkciami (píling, napnutie pleti, čistenie pórov, čiernych bodiek a vysatia obsahu vyrážok, vyrovnanie vrások). Vákuový čistič pórov Kilpor 2.0 má nastaviteľnosť 5 stupňov sily satia, podľa požiadaviek používateľa.

Vlastnosti

Číslo produktu: XN-8030
Rozmery: 180*40*39 mm
Výkon: 0.7 W
Input napätie: DC 5V

Prúd: ≤500 mA Battery
Kapacita: 1000 mA Charging
Čas nabíjania: cca. 90 min
Čas používania: cca 2.5 hod

Obsah balenia

1. Prístroj 1x
2. Multifunkčné hlavice 4x (1 x Veľká okrúhla s otvorom, 1 x Malá okrúhla s otvorom, 1 x Oválna s otvorom, 1 x Hlavica na dermabráziu)
3. Balenie špongií a umelých krúžkov
4. USB nabíjací kábel 1x
5. Návod na použitie 1x



Časti produktu



1. Hlavica (vymeniteľná)
2. Tlačidlo zapnúť/vypnúť (5 stupňov intenzity satia)
3. LED indikátor batérie
4. Napájanie nabíjania



Počas nabíjania prosím zapojte USB kábel do zdroja/nabíjačky (nie je súčasťou balenia) alebo do PC. Červené svetlo symbolizuje nabíjanie, zelené úspešné ukončenie procesu nabíjania.

Predstavenie hlavíc

Štyri rozličné hlavice



Skráľlite svoju pleť dermabráziou

Umelé mikrokryštáliky pôsobiace cez túto hlavice odstránia odumretú pokožku a očistia pleť.

Hlavica s veľkým otvorom (silné satie)

Táto hlavica je vhodná na silné satie, hlavne na komedóny, mastnú pleť, prach, zbytkové líčenie a pod. ak máte príliš citlivú pokožku buďte opatrní. Použite raz týždenne, 5 minút a hlavne podľa aktuálneho stavu pokožky.



Hlavica s malým otvorom (slabé satie)

Táto hlavica je vhodná na čistenie komedónov, mastnú pleť, prach, zbytkové líčenie a pod. Vhodná na jemnú a citlivú pokožku vďaka slabému satiu.

Oválna hlavica (slabé satie)

Hlavica vhodná na každodenné používanie. Vhodná na vrásky v okolí očí, či úst, vsať a rýchlo pustiť – opakovať dookola. Vhodné taktiež na jemný lifting pokožky.




Inštalácia pred skrášľovacím procesom

1. Pred manipuláciou so zariadením skontrolujte, či je vaša tvár a ruky suché a bez tekutín. Ak by tekutina vnikla do zariadenia, poškodilo by ho to.
2. Uistite sa, že je špongia s filtrom správne vložená do nádoby s filtrom a že je špongia suchá a že do nej nevniká žiadna tekutina, osušte aj pokožku tváre a rúk pred ošetrením inak by sa do čističa mohla dostať voda.
3. Toto zariadenie nie je určené na použitie deťmi alebo osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo nedostatočnými skúsenosťami a / alebo nedostatočnými znalosťami, pokiaľ ich nesleduje osoba zodpovedná za ich bezpečnosť alebo nedostanú pokyny o tom, ako prevádzkovať zariadenie. Deti sa so zariadením nesmú hrať. Čistenie a údržbu by nemali robiť deti, pokiaľ nie sú pod dozorom.
4. Tento výrobok nie je určený na použitie v oblastiach tela, ktoré prešli akýmkoľvek chirurgickým zákrokom alebo majú jazvy. Neodporúča sa ani pre tehotné ženy a pacientov s ochorením srdca.
5. Výstraha: do zariadenia nevťahujte vodu ani ho neumývajte.
6. Počas používania tohto produktu nepoužívajte náhrdelníky, náušnice ani iné šperky na hlave. Náhrdelníky, náušnice a iné druhy šperkov by sa mali pred použitím produktu odstrániť.
7. Ak počas používania tohto produktu pocítite bolesť, okamžite prestaňte s používaním.
8. Toto nie je zdravotnícka pomôcka. Nič z toho, čo obsahuje, by sa nemalo považovať za lekársku pomoc, diagnostiku alebo liečbu.
9. Tento výrobok nie je vodotesný a nemal by sa používať v sprche ani v situáciách, kde sa vyskytuje voda. Jednotku neponárajte do vody.
10. Výrobok neskladujte v kúpeľni alebo v miestnosti s vysokým obsahom vlhkosti.
11. Výrobok neskladujte ani nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla alebo ohňa.
12. Uchovávajte mimo dosahu detí. Toto zariadenie nie je hračka a deti by ho nemali používať ani mať k nemu prístup..
13. Nepoužívajte na podráždenú pokožku. Ak dôjde k podráždeniu pokožky, prestaňte používať.
14. Pri používaní okolo očí buďte opatrní.
15. Toto zariadenie je určené iba na použitie v domácnosti a na sucho.
16. Nikdy nepoužívajte zariadenie bez správne nainštalovaných sacích hláv na sacej trysky.
17. Pravidelne odstraňujte prekážky spôsobené prachom, páperím, vlasmi atď. pretože sa výrazne znižujú sací výkon zariadenia a / alebo všeobecný výkon.
18. Ak sa nepoužíva, skladujte na chladnom a suchom mieste.
19. Ak zariadenie nefunguje tak, ako by malo, bolo zasiahnuté ostrým úderom, spadlo, je poškodené, ponechané vonku alebo spadlo do vody, nepoužívajte ho.
20. Toto zariadenie by sa nikdy nemalo zapínať, keď sa nepoužíva, pri výmene príslušenstva alebo počas čistenia.
21. V prípade poruchy a / alebo poškodenia sa nepokúšajte o opravu sami a zabezpečte, aby bol výrobok správne zlikvidovaný v súlade s miestnymi zákonmi.

Inštalácia pred skrášľovacím procesom

Vložte špongiu do otvoru, tak ako na obrázku;

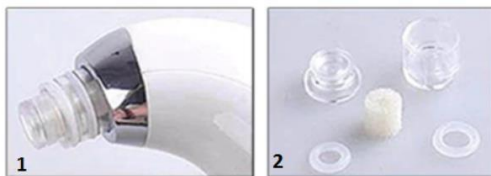

Najskôr odstráňte saciu hlavicu. Chyťte hlavicu a otáčavým spôsobom v smere hodinových ručičiek ju vytiahnite.

Teraz vytiahnite kryt trysky a otáčavým spôsobom v smere hodinových ručičiek ho vytiahnite.



Odstráňte starú alebo/a vložte novú filtračnú špongiu do filtračnej nádoby. Dbajte aby bola špongia dokonale umiestnená. Založte späť kryt trysky (zatočte krytom aby sa uzavrel).



Teraz založte späť hlavicu. Zatočte hlavicom, kým nie je pevne nasadená na prístroji.

AK je silikónový krúžok zničený alebo špongia opotrebovaná, je nevyhnutné ich vymeniť. Vymeňte ich prosím, podľa návodu.

Pred použitím

Poznámka: Je dôležité dodržiavať správny postup používania!

Pred použitím otvorte póry teplou vodou (najlepšie uterákom namočeným v teplej vode, priložte ho na pleť na niekoľko minút), vďaka tomu sa nečistoty ľahšie vysajú.

- Pred použitím pleť naparte alebo použite teplý mokrý uterák, či krém na odstránenie čiernych bodiek, cca 5 minút aby sa póry otvorili.
- Dbajte nato aby boli póry otvorené, či už vďaka horúcemu kúpeľu alebo športovej aktivite. Pleť musí byť aj dobre hydratovaná.
- Pohybujte čističom pomaly po pleti. **Nečistite jedno miesto príliš dlho aby ste pleť nepoškodili.** Vytiahnite akné, čierne bodky, nečistoty. Ak sú čierne bodky prihlboko, používajte zmäkčovací krém.
- Po čistení použite tónovaciu vodu alebo studenú vodu na uzatvorenie pórov..



Návod



KROK 1: Odstráňte make up a umyte pleť.

KROK 2: Použite teplý vlhký uterák alebo naparte pleť – póry musia byť otvorené

KROK 3: Aplikujte zmäkčovací krém na uvoľnenie čiernych bodiek.

KROK 4: Vyberte si hlavicu podľa preferencií a stavu pleti. Vždy začínajte s najslabším stupňom satia.

KROK 5: Začnite pohybovať čističom po pleti pomaly z jednej strany na druhú, rovnakým tempom. Nezdržiaujte sa na jednom mieste prídlho – môže to spôsobiť malé zranenie. Netlačte a neodťahujte kolmo hore. Nečistite jedno miesto dlhšie než tri sekundy – hrozia modrinky a začervenanie.

KROK 6: Po čistení je potrebné póry uzavrieť – použite ľadový uterák, studenú vodu, či tonikum na stiahnutie pórov. Môžete aplikovať aj masku na stiahnutie pórov.

Ako si vybrať správnu intenzitu satia?

Tento vákuový čistič pórov je vhodný pre široké spektrum typov pleti. Slabé satie level 1 a level 2 je vhodné pre suchú a citlivú pokožku. Prím na prvé satie použite najskôr malú hlavicu. Level 3 – tzv. stredné satie je vhodné na normálnu až zmiešanú pokožku. Silné satie level 4 je na mastnú pokožku a najsilnejší stupeň satia 5 je na problematickú pokožku s veľkými pórmí.

Stlačením tlačidla napájania spustíte zariadenie na nízkej úrovni 1. Dvojitým stlačením tlačidla napájania spustíte nízku úroveň 2.

Trikrát stlačte tlačidlo napájania, čím sa spustí stredná úroveň 3. Štvrtým stlačením tlačidla napájania spustíte vysokú úroveň 4.

Na spustenie vysokej úrovne stlačte päťkrát tlačidlo napájania 5. Šesťkrát stlačte tlačidlo napájania a zariadenie sa vypne.

Dermabrázia na pleť

- 1.) Nasadte hlavicu mikrodermabrázie, umyte a vysušte pleť.
- 2.) Začnite od brady a pohybujte prístrojom smerom hore.
- 3.) V oblasti líc postupujte z prostriedku ku krajom.
- 4.) V oblasti čela postupujte z prostriedku ku krajom čela.
- 5.) Umiestnite prístroj do zóny 1 a pohybujte zdola nahor.

Čistite komedóny, maz, zvyšky kozmetiky atd.

- 1.) Nasadte veľkú alebo malú hlavicu (podľa typu pleti).
- 2.) Zarovnajzte otvor sondy s oblasťou kože, kde je potrebné sa o ňu starať, presúvajte sa v jednom smere a nie dopredu a dozadu a nepoužívajte ju príliš dlho.



Starostlivosť o vrásky

- 1.) Nasadte oválnu hlavicu
- 2.) Držte stroj tak, aby ste si dávali pozor na rohy očí, nosa, úst a iných častí tváre, upravte stojany stroja podľa vašich potrieb.
- 3.) Môžete sať oblasť, kde je potrebné sa o ňu rýchlo starať a uvoľniť ju, a potom znova nasávajte. Po dobu 5 minút opakujte.

Poznámky:

- Pri používaní nezabudnite na pohyb, nezdržujte sa príliš dlho na jednom mieste.
- Pred použitím naparte pleť nad horúcu paru alebo použite horúci uterák, či odstraňovač čiernych bodiek na 5 minút. Úplne otvorte póry, aby ste zaistili čo najlepší výkon produktu.

POZOR: nečistite jednu oblasť príliš dlho, môže to spôsobiť začervenanie alebo fialový odtieň pleti. Ak sa farba pleti zmení, okamžite ukončite užívanie. Priložte studený a teplý uterák a navštívte lekára.

SPRÁVNÝ POSTUP: Nikdy nedržte čistiť na jednom mieste prídlho. Maximálne 3 sekundy na jednom mieste. Nepoužívajte zariadenie vertikálne na pokožku. Vždy ho posúvajte dopredu alebo dozadu, aby sa zabránilo fialovej a červenej pokožke.

Údržba

Po každom použití saciu hlavicu opláchnite teplou vodou. Nechajte saciu hlavicu vyschnúť na vzduchu. Nepokúšajte sa vyčistiť hlavnú jednotku opláchnutím vodou, pretože nie je vodovzdorná. Ak chcete vyčistiť hlavnú jednotku, utrite ju mäkkou navlhčenou textíliou.

TIPY

- Hydratujte oblasti pleti po čistení vákuovým čističom.
- Pred a po čistení nepoužívajte iné pílingy alebo exofoliačné produkty.
- Netlačte prístrojom na pokožku prisilno. Jeho satie je postačujúce a nevyžaduje sa pritláčanie.

Jemné začervenanie je prirodzený jav a zmizne po krátkom čase.

POZNÁMKA: Vysávač pórov sa môže používať jedenkrát týždenne na suchú pleť. Na mastnú a zmiešanú pleť sa môže používať dvakrát týždenne. Nepoužívajte ho dlhšie ako päť minút denne.

RIEŠENIE POTIAŽÍ:

- Ak prístroj nefunguje, skontrolujte, či je nasávacía hlava správne nainštalovaná, alebo skontrolujte, či sa nenachádzajú nejaké súčasti, ktoré sa musia vyčistiť.
- Ak zariadenie pracuje pomalšie, vyčistite saciu hlavu a produkt nabite.

Recycling and disposal instructions



Toto označenie symbolizuje, že tento výrobok by sa nemal likvidovať s ostatným domovým odpadom v celej EÚ. Predchádzať možnému poškodeniu životného prostredia alebo zdravia ľudí nekontrolovateľnou likvidáciou odpadu, recyklovať zodpovedne a propagovať udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite systémy na vrátenie a zber alebo kontaktujte predajcu, u ktorého bol produkt zakúpený. Vezmú tento produkt na recykláciu bezpečnú pre životné prostredie.



Vyhlasenie výrobcu, že výrobok spĺňa požiadavky platných smerníc EC Directives.