

SMILY

Prenosni električni čistilec zob



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Dragi kupec,
hvala, ker ste kupili naš izdelek.

Od zdaj naprej lahko vzdržujete zdrave zobe in dlesni. Ultrazvočni čistilec zob SMILY lahko učinkovito odstrani zobne obloge, zobni kamen in madeže ter prepreči boleznih dlesni. Ta večnamenski čistilec zob z naprednimi vibracijami za odstranjevanje zobnega kamna in masažo dlesni vam vsako jutro daje samozavesten nasmeh in svež zadah!

V tem priročniku najdete varnostne smernice in navodila za uporabo. Pred uporabo izdelka natančno preberite priročnik.

PAKET VSEBUJE:

- 1x Prenosni električni čistilec zob
- 1x Polnilni kabel
- 1x uporabniški priročnik



SPECIFIKACIJE

Nazivna napetost: 3,7 V	Čas delovanja: približno 2 uri
Zmogljivost baterije: 300 mAh	Stopnje delovanja: 5
Čas polnjenja: Približno 2 uri	Stopnja vodoodpornosti: IPX6
Adapter: 5V / 5mA	Slog: Polnjenje (vgrajena baterija)
Tok v stanju pripravljenosti: 20uA	Uporabniki: odrasli
Nazivni tok: 200mA	Material: medicinski silikon + plastika
Hrup motorja: manj kot 60 decibelov	Delovno okolje: običajna temperatura

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA


Pred uporabo izdelka natančno preberite ta priročnik IN GA SHRANITE ZA UPORABO V PRIHODNOSTI.

- Čistilec je zasnovan za zobozdravstvene namene. Namenjen je odstranjevanju zobnega kamna na zobeh in drugim zobozdravstvenim namenom, pri katerih so ultrazvočne vibracije koristne. Ne uporabljajte ga na mestih, kjer uporaba ni predvidena. Če niste prepričani glede pravilne uporabe, se obrnite na lokalnega prodajalca ali trgovino, kjer ste ga kupili.
- Uporabljajte samo za predvidene namene. Neupoštevanje navodil za uporabo lahko povzroči resne poškodbe uporabnika ali izdelka, ki ga morda ne bo več mogoče popraviti. Pred uporabo tega izdelka se prepričajte, da ste preučili in razumeli navodila za uporabo.
- Med čiščenjem vedno postavite konico na površino zob. Izogibajte se nepotrebni stiku konice z mehкими tkivi, kot so dlesni, sluznica ali koža.
- Pred uporabo preverite, ali konica pravilno deluje. Če ugotovite, da prihaja do nepravilnosti, takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na prodajalca.
- Med čiščenjem ne dovolite, da se konica dotika keramične proteze. To lahko poškoduje konico.
- Čistilec zob uporabljajte samo z originalnim napajalnikom.

- Preden napajalnik priključite v vtičnico, se prepričajte, da napetost, navedena na oznaki, ustreza napetosti v vtičnici.
- Kovinske glave čistilca ni mogoče zamenjati.
- Izdelka ne izpostavljajte zunanjem okolju, ekstremnim temperaturam, neposredni sončni svetlobi, prekomerni vlagi ali prekomerno prašnim okoljem.
- Uporabljajte ga pri temperaturah od -10 °C do 40 °C v zaprtih prostorih.
- Izdelka ne perite ali namakajte dlje časa.
- Ta izdelek je namenjen samo odraslim. Po uporabi izdelek pravilno shranite. Hranite izven dosega otrok, da ne pride do poškodb.
- Izdelek vsebuje baterijo. Ne postavljajte ga v ogenj ali posodo z visoko temperaturo, da ne pride do požara ali eksplozije.
- Izdelka prav tako ne postavljajte v bližino grelnikov, odprtega ognja ali drugih virov toplote.
- Čistilec zob držite na zadostni razdalji od oči.
- Napajalnika ne odklopite iz vtičnice tako, da povlečete napajalni kabel. Tako lahko poškodujete napajalnik ali vtičnico. Napajalnik izključite iz vtičnice tako, da izvlečete vtič.
- Pred uporabo vedno preverite, ali je kateri od sestavnih delov poškodovan. Poškodovanih sestavnih delov ne smete uporabljati in jih je treba zamenjati.
- Kabla napajalnika ne polagajte na ostre predmete.
- Da preprečite morebitne nevarne situacije, čistilca za zobe ne popravljajte sami in ga na noben način ne spreminjajte. Za vsa popravila se obrnite na pooblaščen servis. S posegom v napravo tvegate razveljavitev zakonskih pravic, ki izhajajo iz neustreznegadelovanja ali garancije kakovosti.
- Naprave ne uporabljajte s poškodovanim kablom ali vtičem ali v primeru, ko naprava ne deluje oziroma je kakorkoli poškodovana.
- Kabla ne navijajte okoli naprave.
- Vsako servisiranje ali popravilo mora opraviti pooblaščen serviser.
- Izdelek ni primeren za uporabo v prisotnosti vnetljivih plinov.
- Napravo uporabljajte samo za predvideni namen.

Pozor: izdelka ne uporabljajte med polnjenjem.

SESTAVNI DELI

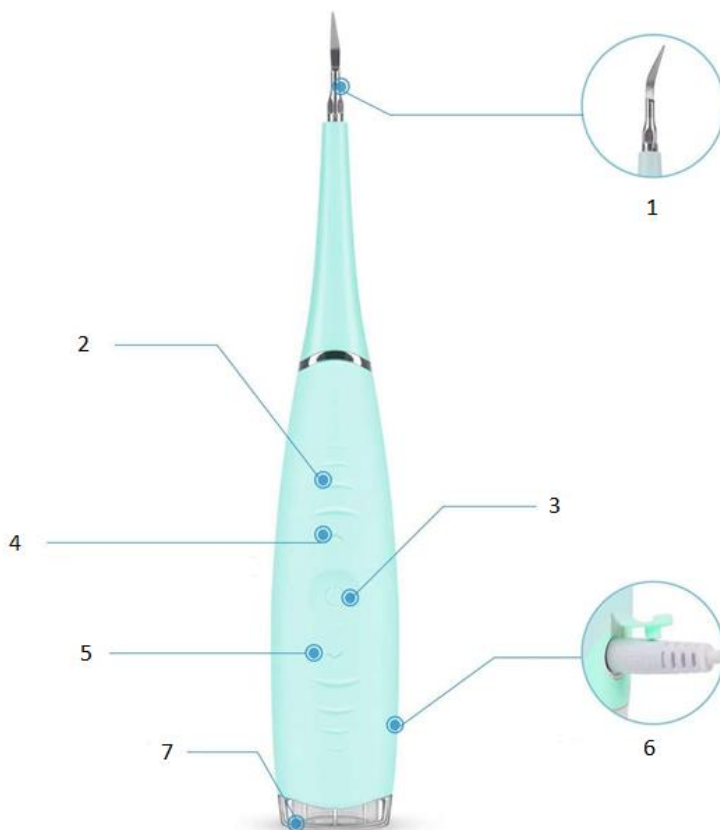

1. Čistilna glava	5. Gumb za nižjo moč
2. Protizdrsni trak	6. Vhod za polnjenje
3. Gumb za vklop/izklop	7. Indikator polnjenja
4. Gumb za višjo moč (skupaj 5 nastavljivih stopenj)	

POLNENJE

Polnjenje s kablom USB:

Varno in hitro polnjenje s kablom USB.

1. Polnilnik priključite v odprtino na spodnji strani čistilca zob in ga priključite v električno vtičnico.
2. Indikator z rdečo lučko se bo prižgal, ko boste pričeli s polnjenjem. Ko je naprava povsem napolnjena, sveti zelena lučka.



OPOMBA:

- Polnjenje traja približno 2 uri.
- Med polnjenjem se čistilec zob preklopi v način izklopa (naprava med polnjenjem ne bo delovala).
- Ko je izdelek napolnjen, ga lahko uporabite približno 200-krat.

Ko čistilec polnite prvič ali če ga dlje časa niste uporabljali (več kot 3 mesece), lahko napajanje traja več časa.

- Napolnjen čistilec zob izključite iz napajalnika in napajalnik izvlecite iz električne vtičnice. Ko čistilec zob izključite iz napajalnika, se LED indikator polnjenja izklopi.

Priporočila za daljšo življenjsko dobo baterije:

- Čistilec zob polnite pri sobni temperaturi.
- Ne pustite ga priklopljenega na vir električne energije dlje, kot traja polnjenje.
- V idealnem primeru hranite čistilec zob popolnoma napolnjen.
- Če naprave časa ne uporabljate, jo napolnite vsaj enkrat na 6 mesecev.

NAVODILA ZA UPORABO



Čistilec zob deluje po principu pretvorbe električne energije v ultrazvočno energijo vibracij.

Pritisnite gumb za vklop, da vklopite napravo, prilagodite moč z gumbom za višjo in nižjo moč in začnite s čiščenjem.





Konico namestite na zob tako, da je gibanje konice vzporedno s površino zoba. Prva 2 mm konice sta najučinkovitejša!

Običajno čiščenje redko zahteva več kot 50% moči. Odstranjevanje vodnega kabla bo morda zahtevalo večjo nastavitv moči.

Pazite, da se med čiščenjem ohrani stik med konico in površinozoba. Konico počasi premikajte naprej in nazaj in pustite, da naprava opravlja svojedelo. Uporabljajte kratke in dolge poteze, tako da je celotna površina vsakega zoba očiščena.

Konica je običajno usmerjena proti dlesni.

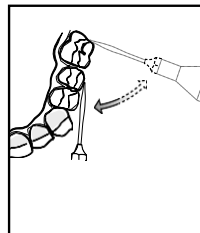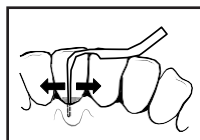

Da bi konica delovala vzporedno s površino vsakega zoba, je pomembno, da sledite anatomiji zoba.



S pravilno nastavitvijo moči, ustreznim pritiskom na zob (približno 20 gramov, vendar ne več kot 50) in konico, ki deluje vzporedno s površino, bo čiščenje nežno, tiho in učinkovito.



POZOR!

- Če med čiščenjem zaslišite škripajoč zvok (glasen in dominanten), je lahko pritisk na zob prenizek ali konica ni vzporedna s površino zoba.
- Ne pritiskajte preveč z roko. Zob se dotikajte z rahlim pritiskanjem.
- Bodite pozorni pri čiščenju okoli občutljivih dlesni.
- Za nekatere uporabnike je prva uporaba nekoliko zahtevna, a postopoma bo čistilec zob postal obvezen pripomoček pri negi vaših zob!
- Vodni kamen in umazanija sta po uporabi v praškasti obliki. Zato si po zaključku izperite usta.
- Med uporabo mora biti v ustih prisotna zadostna količina vlage.
- Če med uporabo količina vlage v ustih pade, si sperite usta.
- Kadar napravo uporabljate na notranji strani zoba, uporabite zobno ogledalo.

Po čiščenju zob;

- Dobro izperite usta.

- Sperite kovinsko glavo pod čisto tekočo vodo,
- Obrišite ohišje čistilca zob.

Navodila za recikliranje in odlaganje



Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite uporabljeno napravo vrniti, uporabite sistem za vračilo ali kontaktirajte prodajalca, kjer ste napravo kupili. Prodajalec lahko napravo reciklira na okolju prijazen način.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.

