

## SIX PACK KOMPLET

### 1. Kako deluje naprava?

Six pack komplet s pomočjo minimalnega električnega toka krči vaše mišice in poskrbi za nežno masažo ali za utrjevanje mišic:

- Sprosti napeta ramena, hrbet in pas
- Izboljša se tonus mišic
- Učinek masaže

### 1. Specifikacije:

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Napetost:          | Alkalna baterija 1.5V AAx2EA |
| Using mode:        | A-F(6mode)                   |
| Frekvenca:         | 1~100 Hz                     |
| Trajanje programa: | 12 minut                     |
| Izhod:             | Max. 9.8 mA                  |
| Velikost:          | 21x10x2.3 cm                 |
| Teža:              | 57,4 g                       |

### 2. Lastnosti izdelka:

#### 2.1. Terapija z nizko frekvenco

S pomočjo elektrike se ustvari nizka frekvenca z ritmom, ki deluje blagodejno na telo. Nastavite si jakost tako, da se boste dobro počutili. Nizka frekvenca deluje nežno na telo, podobno kot masaža.

#### 2.2. Izbirajte med 6 programi

2.2.1. Enostavno izbirajte med 6 načini delovanja

2.2.2. Program se samodejno izključi po 12 minutah

### 3. Kako ga uporabljati




**ON/INC:** gumb za vklop/povečanje intenzitete

**OFF/DEC:** gumb za izklop/zmanjšanje intenzitete

**PROGRAM:** preklapljanje med programi

Lučke za indiciranje načina delovanja:

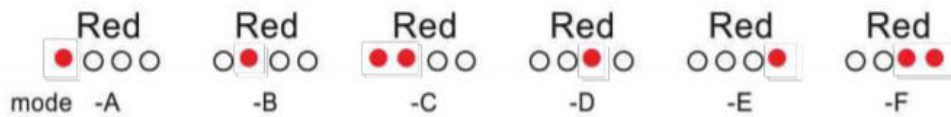

Ko pritisnete na gumb za vklop oz. povečanje intenzitete, lučka sveti bolj intenzivno in obratno, ko pritisnete gumb za izklop oz. zmanjšanje intenzitete, lučka sveti manj intenzivno.

- Oba gumba imata 10 stopenj
- Gumb za preklop med programi: izbirajte med 6 načini (A~F)
- Ko se baterija izprazni, odstranite pokrovček z rezervarčka in zamenjate baterijo ter zaprite s pokrovčkom.

#### 1. Kako uporabljati Six pack komplet

- Vedno uporabite na čisti in suhi koži
- Odstranite zaščitno folijo z gelnih lističev
- Namestite napravo na željen del telesa (trebuh, noge, ramena itd.)

**! NE PRIŽIGAJTE NAPRAVE PREDEN JO NAMESTITE NA KOŽO.**

**! NE DOTIKAJTE SE LEPLJIVEGA DELA, SAJ TO MOČNO SKRAJŠA ŽIVLJENSKO DOBO GELNIH LISTIČEV.**

#### 1. Prva uporaba

- Vzemite napravo iz škatle
- Namestite napravo na željen del telesa
- Izberite željen program
- Prilagodite intenziteto
- Trajanje programa je 12 minut
- Pritiskajte gumb za izklop, dokler lučka ne ugasne

Napravo je najbolje uporabljati do 12 minut naenkrat, 2-3x dnevno. Če jo uporabljate dlje, lahko občutite utrujenost.

Izogibajte se uporabi 30 minut po obroku, najbolje pa je uporabiti napravo po tuširanju na čisti in suhi koži

#### 1. Nega

- Napravo izklopite po uporabi.
- Na gelne lističe namestite zaščitno folijo, da ta ostane lepljiva in čista.
- Umazanijo očistite z vlažno krpo in nežnim čistilom.

- Ne izpostavljajte direktni sončni svetlobi, vročini, vlagi, ognju, elektriki ipd.
- Hranite izven dosega otrok.
- Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami.
- Če naprave ne uporabljate dlje časa, odstranite baterijo iz daljinca.

#### 1. Menjava baterije

- Odprite pokrovček rezervarčka za baterije
- Pravilno vstavite baterijo (pazite na + in -)
- Zaprite rezervarček s pokrovčkom
- Vključite napravo in preverite, če deluje

#### POVZETEK:



1. Odprite rezervaček za baterije



2. Vstavite bateriji (2xAAA)



3. Pritrdite daljinec na enoto



4. Odlepите zaščitno folijo



5. Pritrdite daljinec na enoto



6. Namestite trak na roko/nogo