

HR: NECKSHA – KORISNIČKI PRIRUČNIK

Parametri uređaja


Napon punjenja: 5V

Nazivna snaga: 0,6W

Radni napon: 3.7V

Radna struja: 0.12A


Primjena proizvoda

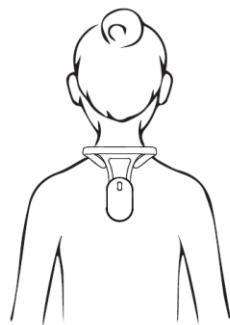

1. Ovaj proizvod visi na vratu, ovratnik pristaje uz tijelo, a prednji kraj se nalazi ispod ključne kosti.
2. Provjerite je li senzor senzora okomit i blizu tijela.
3. Ovaj proizvod treba pričvrstiti na kožu i nositi unutar odjeće, inače bi mogao biti netočan i lako bi mogao ispasti.

Praćenje postavki podsjetnika

1. Pokretanje i gašenje
2. Tipka za uključivanje/isključivanje Uključivanje: pritisnite i držite 2 sekunde
3. Isključivanje: pritisnite i držite 2 sekunde.
4. Način postavljanja
5. Podesite odgovarajući kut korekcije, dugo pritisnite tipku za uključivanje 2 sekunde i instrument će prikazati dva "83" i zatreperiti 3 puta, a zatim prikazati " ", što znači da proizvod počinje raditi normalno.
6. Podsjetnik za praćenje u slučaju saginjanja ili savijanja ramena unazad, korisnik će kontinuirano vibrirati kada sjedeći položaj prijeđe 25 stupnjeva dok se sjedeći položaj ne ispravi. Svaki podsjetnik vibracije bit će snimljen i neće vibrirati kada se vrati na 5-0 stupnjeva.

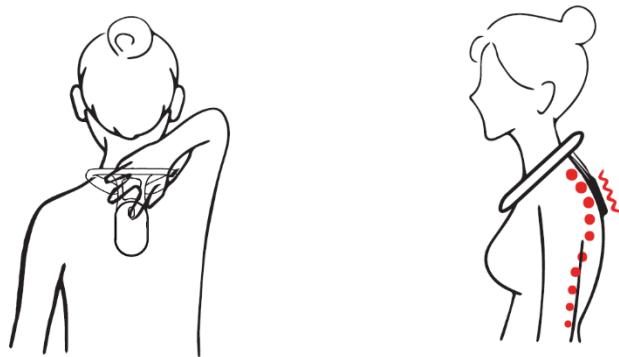


Opis podsjetnika i indikatora

Funkcionalni status	Ključni rad	Opis podsjetnika	Upute na zaslonu
Uključite napajanje	Pritisnite i držite 2 sekunde	Zaslon prikazuje " "	" " Treperi 3 puta
Ugasiti	Pritisnite i držite 2 sekunde	*	Svjetlo se gasi
Zabilježite referentnu pozu	*	Pošaljite podsjetnik vibracijom	
Podsjetnik na geste	*	Nastavlja vibrirati dok se uređaj za ispravljanje položaja ne ispravi	Vremena korekcije + 1
Punjjenje	*	*	Tijekom punjenja na ekranu se prikazuje " " Bljesak, bljesak, puno dugog svjetla.

Podsjetnik:


1. Preporuča se potpuno napuniti host prije prve uporabe.
2. Nakon duljeg korištenja, ako je vibracija slaba, preporučuje se da ga na vrijeme napunite.
3. Ovaj proizvod se preporučuje za djecu stariju od 4 godine, tinejdžere i odrasle.
4. Ovaj proizvod treba pričvrstiti na kožu i nositi unutar odjeće kako bi se izbjeglo netočno podsjećanje, padanje i druge situacije.
5. Sama korekcija nije laka stvar. Za postizanje rezultata potrebna je inicijativa, trud i upornost.

Upute za punjenje

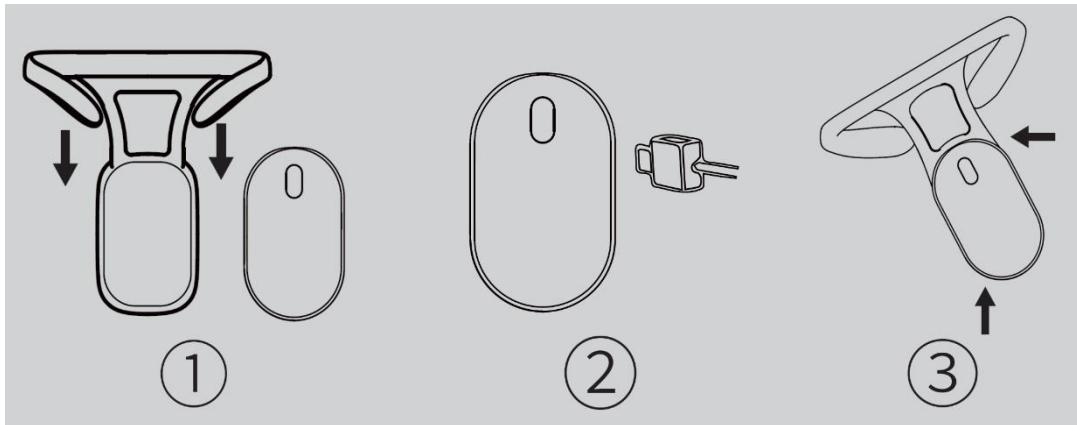

1. Prije punjenja potrebno je ukloniti senzor senzora, uhvatiti silikonski vrat i nježno ga povući prema dolje, a host će izaći.
2. Upotrijebite prateći standardni mikro-USB kabel za punjenje za povezivanje glavnog senzora za punjenje.
3. Nakon što je u potpunosti napunjen, instalirajte senzor senzora natrag na ovratnik, nagnite i poravnajte donju graničnu četvrtastu šipku i pritisnite je prema dolje, a zatim pričvrstite gornju graničnu četvrtastu šipku u odgovarajući položaj senzora.

Obrada otpadnih baterija

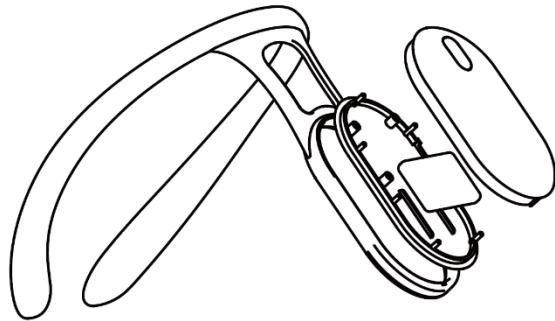

1. Kada uređaj dosegne svoj vijek trajanja, unutarnju bateriju će možda trebati ukloniti u skladu sa zakonima i propisima zemlje ili regije u kojoj se nalazi. Ako se baterija ne može ukloniti, odnesite proizvod u centar za recikliranje koji je odredila vlada.
2. Nemojte rastavljati proizvod sami ako ga ne želite baciti. Prerano rastavljanje će oštetiti proizvod; Tijekom rada potrebno je pridržavati se osnovnih sigurnosnih mjera opreza. Napajanje mora biti isključeno prije uklanjanja baterije.
3. Prije rastavljanja baterije provjerite je li baterija ispraznjena; Ako trebate ostati bez struje, možete ga uključiti dok se automatski ne isključi.
4. Za pravilno recikliranje ili odlaganje baterija, pitajte centar za recikliranje koji je odredila lokalna uprava da li želite reciklirati druge dijelove ortočkog pribora.

5. Pazite da ne napravite kratki spoj na pozitivnim i negativnim polovima baterije. Nakon vađenja baterije proizvod se više ne smije uključivati.

Čišćenje i skladištenje

1. Dio glavnog senzora ovog proizvoda nije vodootporan. Molimo ne ispirati vodom. Ako je potrebno čišćenje, obrišite ga suhom krpom ili ocijeđenom suhom vlažnom krpom.
2. Ovratnik se može prati zasebno ili brisati mokrom krpom. Nakon čišćenja, osušite ga na hladnom mjestu kako biste izbjegli sunce.
3. Nakon korištenja hlapljivih tvari kao što je alkohol za čišćenje i dezinfekciju, stavite ih na hladno i prozračeno mjesto i pričekajte da tvari potpuno ispare.
4. Uvjeti skladištenja: temperatura: -10 °C + 55 °C, relativna vlažnost: 10% -80% R.H. stanje bez kondenzacije.
5. Ako se proizvod ne koristi dulje vrijeme, redovito punite senzor kako biste izbjegli oštećenje.
6. Čuvajte u dobro prozračenom okruženju bez korozivnog plina, izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost i držite podalje od opreme za grijanje i otvorene vatre.

UPUTE ZA RECIKLAŽU I ODLAGANJE:



Ova oznaka znači da se proizvod ne može odlagati kao ostali kućni otpad u cijeloj EU. Kako bi se spriječila potencijalna šteta za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada. Reciklirajte odgovorno kako biste promovirali održivo korištenje materijalnih resursa. Ako želite vratiti rabljeni uređaj, upotrijebite sustav predaje i preuzimanja ili kontaktirajte trgovca od kojeg ste kupili proizvod. Prodavač može prihvati proizvod na recikliranje sigurno za okoliš.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima važećih EU direktiva.