

HU: NECKSHA - FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Eszköz paraméterei

Töltési feszültség: 5V

Névleges teljesítmény: 0.6W

Működési feszültség: 3.7V

Működési áram: 0.12A


Termék alkalmazása



1. Ezt a terméket a nyakra akasztják, a gallér a testhez illeszkedik, és az elülső vége a kulcscsont alatt helyezkedik el.
2. Győződjön meg róla, hogy az érzékelőgazda függőlegesen és a testhez közel van.
3. Ezt a terméket a bőrhez kell rögzíteni és a ruházaton belül kell viselni, különben pontatlan lehet és könnyen leeshet.

Emlékeztető beállítások figyelése

1. Indítás és leállítás
2. Be-/kikapcsoló gomb Bekapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
3. Kikapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig.
4. Beállítási módszer
5. Állítsa be a megfelelő korrekciós szöveget, nyomja meg hosszan a bekapcsoló gombot 2 másodpercig, és a műszer két "83" kijelzőt jelenít meg, és 3 alkalommal villog, majd megjelenik " ", ez azt jelzi, hogy a termék normálisan kezd működni.
6. Monitoring emlékeztető görnyedés vagy vállhátrahajlás esetén a felhasználó folyamatosan vibrálni fog, ha az ülőhelyzet meghaladja a 25 fokot, amíg az ülőhelyzetet nem korrigálja. Minden egyes rezgési emlékeztető rögzítésre kerül, és nem rezeg, amikor visszatér 5-0 fokos értékre.

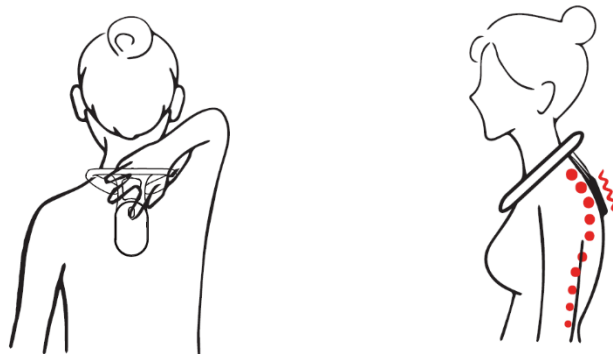


Emlékeztető és mutató leírása

Funkcionális állapot		Kulcsművelet	Emlékeztető leírása	Képernyő utasítások
Bekapcsolás		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig	A képernyőn megjelenik a " "	" " Villog 3 alkalommal
Lezárás		Lezárás	*	A fény kialszik
A referencia póz rögzítése		*	Vibrációs emlékeztető küldése	
Gesztus emlékeztető		*	Addig rezeg, amíg a tartáskiegyenesítő ki nem egyenesedik	Korrekciós idők + 1
Töltés		*	*	Töltés közben a képernyőn megjelenik a " " Villanás, villanás, tele hosszú fénnel.

Emlékeztető:


1. Javasoljuk, hogy az első használat előtt töltsse fel teljesen a hosztot.
2. Hosszú ideig tartó használat után, ha a rezgés gyenge, ajánlott időben feltölteni.
3. Ez a termék 4 évesnél idősebb gyermekek, tizenévesek és felnőttek számára ajánlott.
4. Ezt a terméket a bőrhez kell rögzíteni, és a ruházaton belül kell viselni, hogy elkerülje a pontatlan emlékeztetést, a leesést és egyéb helyzeteket.
5. Maga a korrekció nem egyszerű dolog. Kezdeményezést, erőfeszítést és kitartást igényel az eredmények eléréséhez.

Töltési utasítások

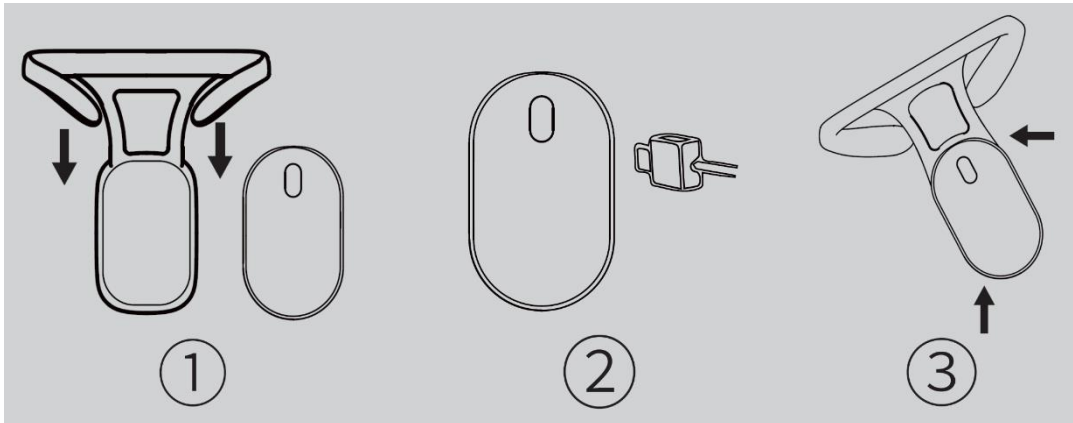

1. Töltés előtt el kell távolítani az érzékelőgazda, meg kell fogni a szilikon nyakát, és óvatosan lefelé kell húzni, és a gazda kijön.
2. Használja a támogató szabványos micro-USB töltőkábelt az érzékelőgazda csatlakoztatásához a töltéshez.
3. Miután teljesen feltöltődött, szerelje vissza az érzékelőgazdaegységet a nyakövrre, döntse meg és igazítsa az alsó határ négyzettrácsot, és nyomja le, majd csíptesse be a felső határ négyzettrácsot az érzékelő megfelelő pozíciójába.

Hulladék akkumulátorok kezelése

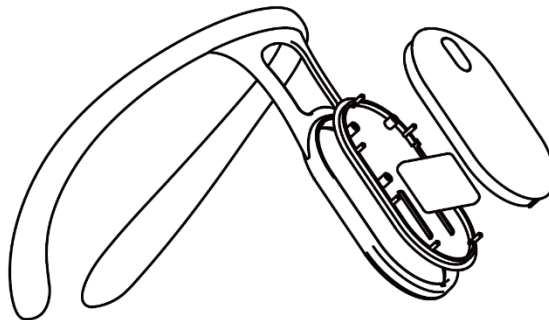

1. Amikor a készülék eléri élettartamát, előfordulhat, hogy a belső akkumulátort el kell távolítani az adott ország vagy régió törvényeinek és előírásainak megfelelően. Ha az akkumulátor nem távolítható el, kérjük, adja be a terméket a kormány által kijelölt újrahasznosító központba.
2. Hacsak nem kell kidobni, ne szerelje szét a terméket saját maga. Az idő előtti szétszerelés károsítja a terméket; A működés során be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket. Az akkumulátor eltávolítása előtt le kell választani a tápegységet.
3. Az akkumulátor szétszerelése előtt győződjön meg arról, hogy az akkumulátor lemerült; Ha le kell merülnie, bekapcsolhatja a készüléket, amíg az automatikusan ki nem kapcsol.

4. Az akkumulátorok megfelelő újrahasznosítása vagy ártalmatlanítása érdekében kérjük, kérdezze meg a helyi önkormányzat által kijelölt újrahasznosító központot, hogy az ortopédia egyéb részeit is újrahasznosíthatja-e.
5. Vigyázzon, hogy az akkumulátor pozitív és negatív pólusa ne legyen rövidzárlatos. Az akkumulátor kivétele után a terméket nem szabad újra bekapcsolni.

Tisztítás és tárolás

1. A termék érzékelő része nem vízálló. Kérjük, ne öblítse ki vízzel. Ha tisztításra van szükség, kérjük, törölje le száraz ruhával vagy nedves, szárazra csavart ruhával.
2. A gallér külön mosható vagy nedves ruhával törölhető. Tisztítás után kérjük, hűvös helyen szárítsa meg, hogy elkerülje a napfényt.
3. Miután a tisztításhoz és fertőtlenítéshez illékony anyagokat, például alkoholt használt, kérjük, helyezze hűvös és szellőztetett helyre, és várja meg, amíg az anyagok teljesen elpárolognak.
4. Tárolási feltételek: hőmérséklet: $-10\text{ }^{\circ}\text{C} + 55\text{ }^{\circ}\text{C}$, relatív páratartalom: 10% -80% relatív páratartalom nem kondenzáló állapotban.
5. Ha a terméket hosszabb ideig nem használják, a károsodás elkerülése érdekében rendszeresen töltsen fel az érzékelőgazda töltőegységet.
6. Kérjük, tárolja jól szellőző, maró gázoktól mentes környezetben, kerülje a közvetlen napfényt, és tartsa távol a fűtőberendezésektől és nyílt tűztől.

AZ ÚJRAHASZNOSÍTÁSRA ÉS ÁRTALMATLANÍTÁSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK:



Ez a címke azt jelenti, hogy a termék az EU egész területén nem ártalmatlanítható más háztartási hulladékként. Az ellenőrizetlen hulladéklerakásból eredő esetleges környezeti vagy emberi egészségkárosodás megelőzése érdekében. Az anyagi erőforrások fenntartható felhasználásának elősegítése érdekében felelősségteljesen újrahasznosítani. Ha használt készüléket szeretne visszavinni, használja a leadási és gyűjtési rendszert, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kiskereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A kiskereskedő átveheti a terméket környezetbarát újrahasznosításra.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek követelményeinek.