

DA: READSCOPE - BRUGERVEJLEDNING

Sammenfoldeligt forstørrelsesglas med LED-lys

Læs denne vejledning omhyggeligt før brug, og gem den til senere brug.

PRODUKTSPECIFIKATIONER

Produktmodel: 10863-10LC

Batterimodel: 802040

Batteriets nominelle data: Li-ion 3,7 V, 300 mAh, 1,11 Wh

Linsestørrelse: 108 × 63 mm

Forstørrelse: 4×


Fokuseringsafstand: 250 mm

Antal LED-lys: 10 LED-lys

PAKKENS INDHOLD

- 1 × forstørrelsesglas med LED-lys
- 1 × linserengøringsklud
- 1 × brugervejledning
- 1 × Type-C-opladningskabel


PRODUKTOVERSIGT

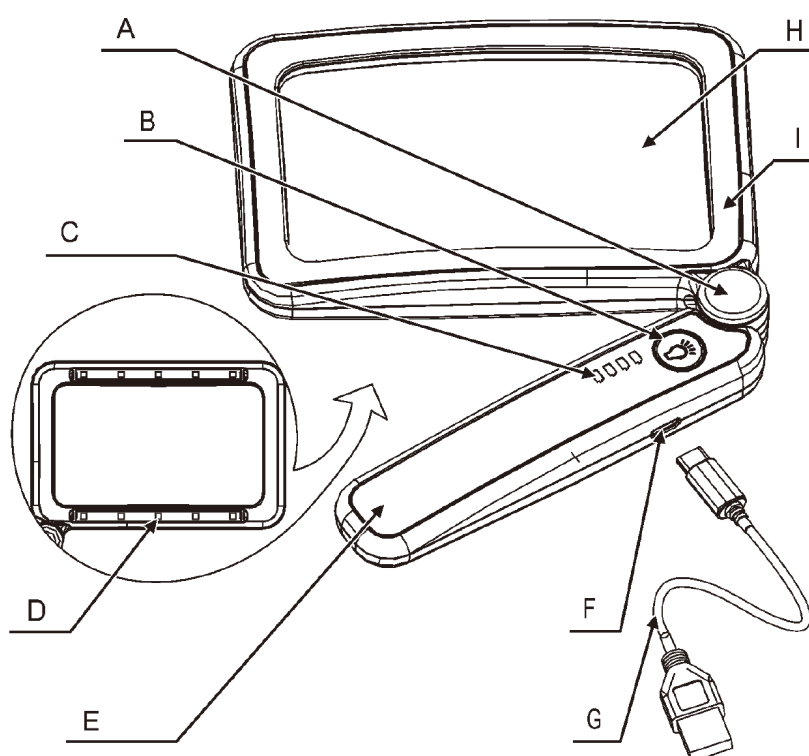

- A. Sammenfoldeligt led
- B. LED-berøringskontakt
- C. Batteriindikator
- D. LED-lys (10 LED-lys)


- E. Justerbart håndtag
 - F. Type-C-opladningsport
 - G. Type-C USB-opladningskabel
 - H. Forstørrelseslinse (108 × 63 mm)
 - I. Linseramme
-

JUSTERING AF HÅNDTAGET

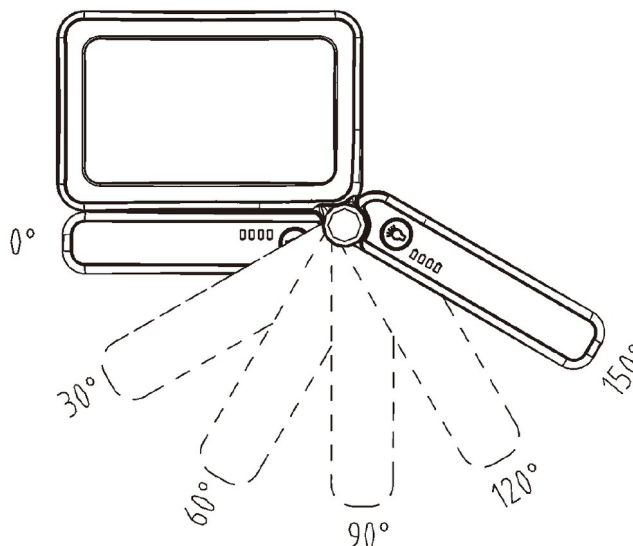

Før brug skal håndtagets (E) vinkel justeres til en behagelig position, der passer til dit greb. Håndtaget kan indstilles i fem forskellige vinkler: 30°, 60°, 90°, 120° og 150°. Vælg den vinkel, der giver den mest behagelige betagtningsposition.

BETJENING AF LED-LYS OG JUSTERING AF LYSSTYRKEN

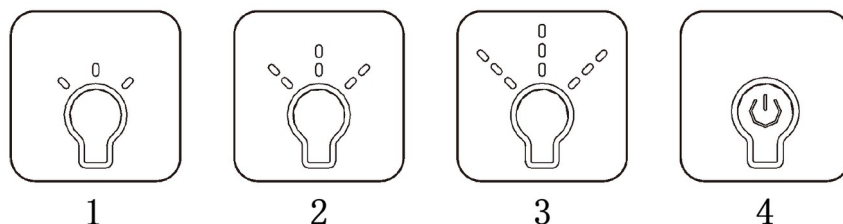


LED-berøringskontakten (B) gør det muligt at vælge forskellige lysstyrkeniveauer.

1. Berør LED-kontakten (B) én gang for at tænde LED-lysene (D) med lav lysstyrke.
2. Berør LED-kontakten (B) anden gang for at skifte til mellem lysstyrke.
3. Berør LED-kontakten (B) tredje gang for at skifte til høj lysstyrke.
4. Berør LED-kontakten (B) fjerde gang for at slukke LED-lysene (D).

BATTERIINDIKATOR OG OPLADNINGSOPLYSNINGER

Batteriindikatoren (C) viser det resterende batteriniveau.

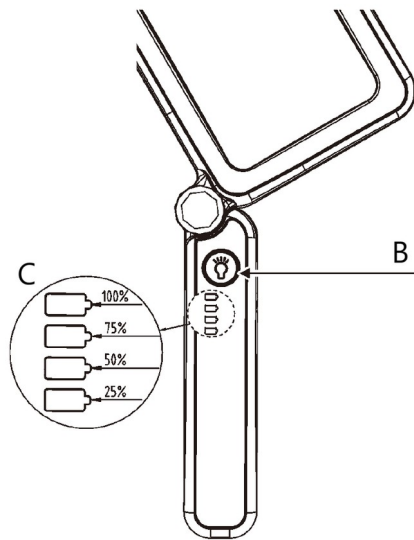


Ved brug med:

- **Høj lysstyrke:** cirka 2 timers drift
- **Mellem lysstyrke:** cirka 3 timers drift
- **Lav lysstyrke:** cirka 6 timers drift

Når kun det sidste indikatorsegment lyser, hvilket svarer til cirka 25% resterende batterikapacitet, skal enheden oplades.

Når det sidste indikatorsegment blinker, er batteriniveauet lavt, og enheden skal oplades med det samme.

OPLADNING AF ENHEDEN

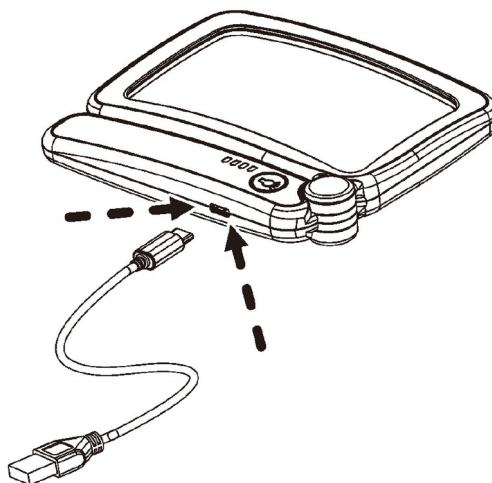


1. Tilslut Type-C-enden af opladningskablet (G) til Type-C-opladningsporten (F) på forstørrelsesglasset.
2. Tilslut USB-enden af opladningskablet til en USB-strømkilde, såsom en computer, en bærbar powerbank eller en USB-oplader.

Enheden kan oplades ved hjælp af almindelige USB-strømkilder.

Efter cirka **3 timers opladning** viser batteriindikatoren fuld opladning. Når indikatoren for 100% batteri lyser konstant og ikke længere blinker, er batteriet fuldt opladet.

Opladningsindgang: 5 V USB-strømforsyning

PLEJE OG RENGØRING AF LINSEN

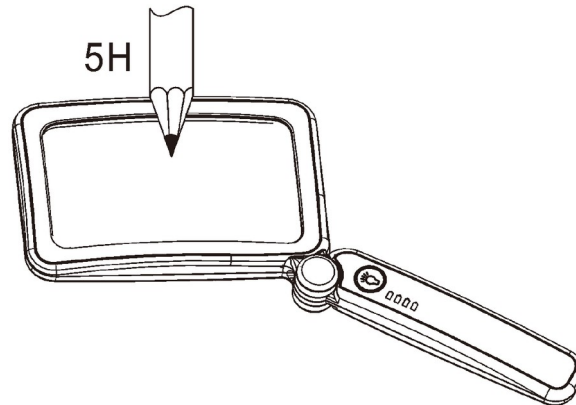

Linsens (H) overflade er specielt hærdet og har en overfladehårdhed på **5H**, hvilket hjælper med at reducere ridser og overfladeskader.

Brug en blød klud eller linserengøringspapir til at rengøre linsen. Brug ikke alkohol, benzin eller andre kemiske rengøringsmidler på linsen (H) eller kabinettet. Forkert rengøring kan beskadige linsens overflade.

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

ADVARSEL!

- Anbring ikke forstørrelsesglasset i direkte sollys, da sollyset, der koncentrerer gennem linsen, kan medføre brandfare.
 - Brug ikke forstørrelsesglasset til at se på solen, da dette kan forårsage alvorlige øjenskader.
 - Hold produktet væk fra overdreven varme, fugt og vand.
 - Enheden må ikke skilles ad eller ændres.
 - Oplad kun enheden med en egnet USB-strømkilde.
-

TEKNISKE BEMÆRKNINGER

Illustrationerne i denne vejledning er kun til reference. Det faktiske produkt kan afvige en smule på grund af produktforbedringer eller variationer i produktionen.

INSTRUKTIONER FOR GENBRUG OG BORTSKAFFELSE:



Denne mærkning betyder, at produktet ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed som følge af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal produktet genbruges på ansvarlig vis for at fremme bæredygtig anvendelse af materialer. Hvis du ønsker at returnere en brugt enhed, skal du benytte indsamlings- og afleveringssystemet eller kontakte den forhandler, hvor du har købt produktet. Forhandleren kan modtage produktet med henblik på miljømæssigt forsvarlig genbrug.



En erklæring fra producenten om, at produktet overholder kravene i de gældende EU-direktiver.